


Leitfaden Fernanpassung Unitron/Vista

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie die aktuellste Version Ihrer **Unitron Remote Plus / Hearing Remote (Vista) App** haben.
2. Achten Sie darauf, dass die Hörgeräte mit Ihrem Smartphone und der App gekoppelt sind.

Klicken Sie hier, falls Sie Probleme mit der Kopplung zu Ihrem Smartphone haben:
[Kopplung mit iPhone](#), [Kopplung mit Android](#).



Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Hörgeräte zu koppeln.

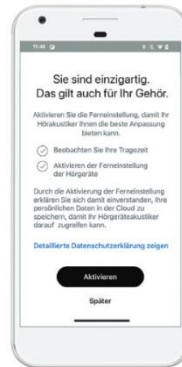

Aktivieren Sie die Feineinstellung gemäß der Eingabeaufforderung der App.

3. Sorgen Sie dafür, dass die Hörgeräte volle Batterien haben bzw. die Akkus vollgeladen sind. Das gleiche gilt für Ihr Smartphone.
4. Stellen Sie sicher, dass Sie über eine stabile Internetverbindung verfügen. Wir empfehlen **WLAN**, mindestens **4G**.
5. Bitte kontrollieren Sie, ob die Schallkanalöffnung frei von Cerumen ist.
6. Begeben Sie sich an einen ruhigen und bequemen Ort.
7. Benötigen Sie für eine bestimmte Umgebung eine neue Einstellung? Dann führen Sie die Datenübertragung, wenn möglich, von dort aus.
8. Sie werden auf Ihrem Smartphone eine **Push-Benachrichtigung** erhalten, wenn neue Einstellungen für Sie verfügbar sind.



*Klicken Sie auf die **Push-Benachrichtigung**, um auf die Anpassung zuzugreifen*

Oder

*Öffnen Sie die App und gehen Sie zu **Einstellungen** → **Meine Hörgeräte** → **Hörgeräte-Anpassungen***



Wählen Sie die Anpassung aus und übernehmen Sie die Änderungen.

Hinweis: Sollte Ihnen der Klang nicht gefallen, können Sie den alten wiederherstellen.

Versuchen Sie folgendes während der Datenübertragung zu vermeiden:

1. Ihre Hörgeräte nicht weiter als 5m weg vom Smartphone zu platzieren,
2. Die Hörgeräte während der Anpassung auszuschalten,
3. Bluetooth Funktion des Smartphones zu deaktivieren,
4. Die App zu beenden oder in eine andere App zu wechseln,
5. zwischen **WLAN** oder **Mobilen Datenverbindungen** hin und her zu schalten.